

KON SICHER DOM

NEU



Jetzt
kostenlose
Muster
bestellen

Kondome - ein sicheres Werbeprodukt

„Tina, was kosten die Kondome?“ Dieser Satz ist unvergessen. Doch seither hat sich viel verändert. Der Umgang mit diesem Thema ist viel offener geworden. Dies liegt vor allem an einem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein und angesichts möglicher Infektionskrankheiten können Kondome wirklich Leben schenken. Kondome als Werbegeschenk sind frech und außergewöhnlich. Die witzigen, oft doppeldeutigen Slogans auf der Kartonverpackung bringen die Kunden zum Schmunzeln.

Bald trifft man sich wieder auf Messen, Partys und anderen Events und dann ist es Zeit für ein Give-Away der neuen Art. Bis dahin ist es aufgrund der kompakten Abmessungen und einem Gewicht von 6 Gramm auch perfekt für Mailing-Aktionen. Das Kondom im Werbebriefchen ist ein Markenprodukt – Made in Germany - und. Die Umverpackung, individuell bedruckt mit Logo und Werbe-Slogan im hochauflösenden Digitaldruck schon ab 150 Stück.

Merkmale

Artikel: Taschis Kondome | **Produkt:** 1 Kondom in Folie verpackt in einem Umschlag, EN ISO 13485:2016, Umschlag (Werbebriefchen) | **Materialien:** Markenkondom SICO SAFETY aus Naturkautschuk, glatt, mit Reservoir, transparent, zylindrisch geformt, mit Gleitmittel, in Folie verpackt; Werbebriefchen aus Karton, Qualität: 250 g | **Größe:** Folienverpackung, 69 x 41 x 5 mm; Werbebriefchen, 70 x 72 x 6 mm; Inhalt, 1 Stück | **Gewicht:** 7 g pro Päckchen | **Mindestauflage:** 150 Stück | **Herkunftsland:** Deutschland

Druck

Werbefläche: Vorderseite, 61 x 62,5 mm; Rückseite 61 x 37 mm | **Bedruckung:** hochauflösender Digitaldruck, 4c auf Karton, zweiseitiger Druck | **Druckdaten:** druckoptimierte pdf-Datei

Versand

Lieferzeit: Standard 15 - 20 Werktage, Express 8 - 10 Werktage; jeweils nach Druck-Freigabe | **Verpackungseinheit:** 500 EP pro Karton | **Versand:** überwiegend via UPS, innerhalb Deutschlands versandkostenfrei | **Zolltarifnummer:** 4014 1000

BEDRUCKUNG

Kondome können individuell auf der Vorder- und/oder Rückseite bedruckt werden. Der untere Teil beinhaltet gesetzliche Pflichtangaben und ist daher nicht bedruckbar. Der Druck erfolgt im hochauflösenden Digitaldruck.

Bitte senden Sie Ihre Datei:

als **PDF-Datei**

- ✓ vektorisierte Daten
- ✓ Schriften in Pfade/Kurven wandeln
- ✓ Mindestschriftgröße 0,6 mm (Kleinbuchstabe)
- ✓ Mindeststärke positive Linien 0,2 pt (0,07 mm)
- ✓ Mindeststärke negative Linien 0,4 pt (0,14 mm)
- ✓ Bilddaten (Raster-Motive): JPG oder TIFF Format, mindestens 300 dpi

Werbebriefchen, Rückseite
oberer Bereich: individuell bedruckbar

unterer Bereich: Pflichtangaben
nicht individuell bedruckbar
Nähere Infos siehe Seite 4




Werbebriefchen, Vorderseite
individuell bedruckbar
Nähere Infos siehe Seite 3

Werbebriefchen, aufgeklappt
Innenseite des Werbebriefchens mit
wichtigen Gebrauchshinweisen
nicht individuell bedruckbar
Nähere Infos siehe Seite 5

Kondom in Folie
Hersteller- und Pflichtangaben
nicht individuell bedruckbar
Nähere Infos siehe Seite 6

BEDRUCKUNG VORDERSEITE

Die Vorderseite kann individuell gestaltet werden.
Der Druck erfolgt im hochauflösenden Digitaldruck.

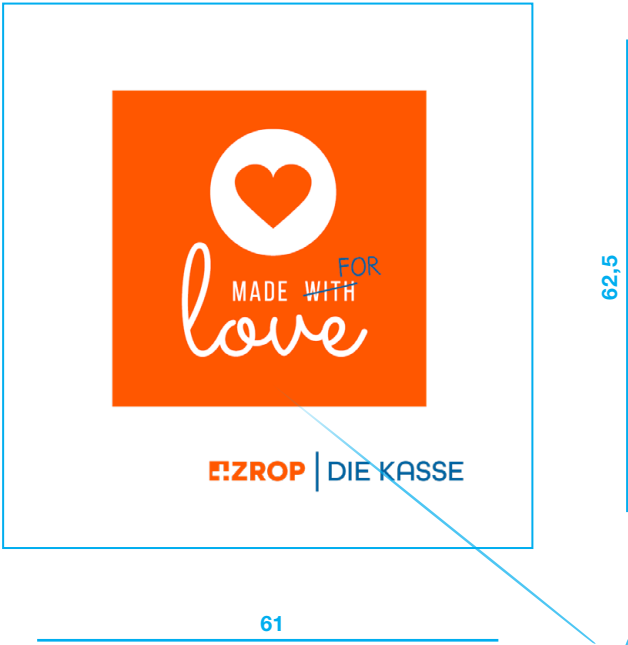

Angaben in Millimetern

Maximale Größe des Aufdrucks 61 x 62,5

BEDRUCKUNG RÜCKSEITE

Die Rückseite kann individuell gestaltet werden.
Der Druck erfolgt im hochauflösenden Digitaldruck.

Maximale Größe
des Aufdrucks 37 x 61



Rückseite
individuell
bedruckbar



*1 PRODUKTSICHERHEITSGESETZ

Bitte beachten Sie, dass laut Produktsicherheitsgesetz die vollständige postalische Adresse auf einem Produkt angegeben werden muss, damit sich der Verbraucher im Schadensfall schriftlich an den Hersteller oder den Inverkehrbringer wenden kann.

*2 HERSTELLERANGABEN


Angaben zum Kondom in den Sprachen deutsch, englisch, französisch und italienisch; LOT Nummer und Verfallsdatum; CE-Kennzeichnung; Hersteller-Adresse sowie weitere Angaben

Angaben in Millimetern



BEDRUCKUNG INNENSEITE

Die Innenseite kann grundsätzlich nicht individuell gestaltet oder verändert werden.
Diese Seite brauchen Sie bei Ihrer Gestaltung also nicht zu berücksichtigen. Die korrekten Inhalte werden vom Kondom-Hersteller eingefügt.

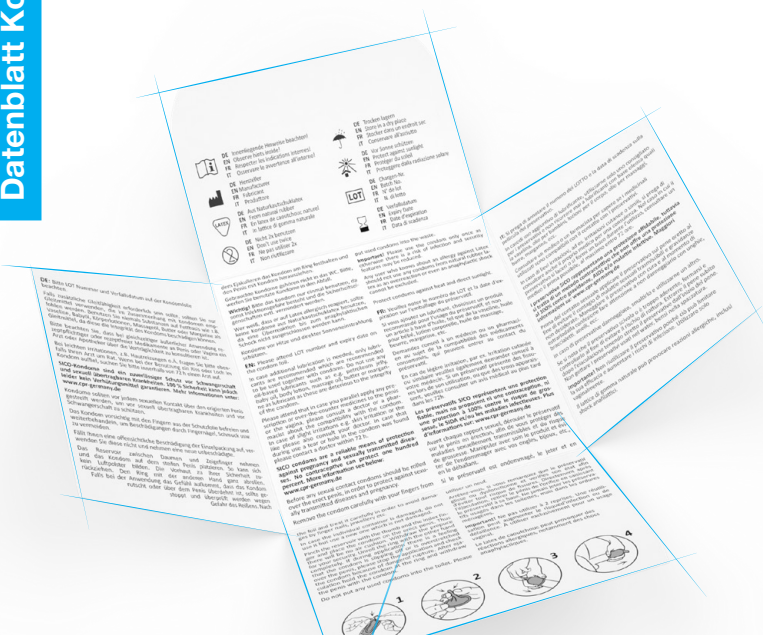

Innenseite nicht individuell bedruckbar

DE: Bitte LOT Nummer und Verfallsdatum auf der Kondomfolie beachten.

Falls zusätzliche Gleitfähigkeit erforderlich sein sollte, sollten Sie nur Gleitmittel verwenden, die im Zusammenhang mit Kondomen empfohlen werden. Benutzen Sie niemals Substanzen auf Fettbasis wie z.B. Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, Massageöl, Butter oder Margarine als Gleitmittel, da diese die Integrität des Kondoms beschädigen können.

Bitte beachten Sie, dass bei gleichzeitiger äußerlicher Anwendung rezeptpflichtiger oder rezeptfreier Medikamente an Penis oder Vagina ein Arzt oder Apotheker über die Verträglichkeit zu konsultieren ist.

Bei leichten Irritationen, z.B. Hautreizungen o.Ä. fragen Sie bitte ebenfalls Ihren Arzt um Rat. Wenn bei der Benutzung ein Riss oder Loch im Kondom auffiel, suchen Sie bitte innerhalb von 72 h einen Arzt auf.

SICO-Kondome sind ein zuverlässiger Schutz vor Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten. 100 % Sicherheit kann jedoch leider kein Verhütungsmittel garantieren. Mehr Informationen unter: www.cpr-germany.de


Kondome sollten vor jedem sexuellen Kontakt über den erigierten Penis gestreift werden, um vor sexuell übertragbaren Krankheiten und vor Schwangerschaft zu schützen.


Das Kondom vorsichtig mit den Fingern aus der Schutzfolie befreien und weiterbehandeln, um Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu vermeiden.


Fällt Ihnen eine offensichtliche Beschädigung der Einzelpackung auf, verwenden Sie diese nicht und nehmen eine neue unbeschädigte.


Das Reservoir zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und das Kondom auf dem steifen Penis platzieren. So kann sich kein Luftpolster bilden. Die Vorhaut zu Ihrer Sicherheit zurückziehen. Den Ring mit der anderen Hand ganz abrollen.


Falls bei der Anwendung das Gefühl aufkommt, dass das Kondom rutscht oder über dem Penis überdehnt ist, sollte gestoppt und überprüft werden wegen Gefahr des Reißens. Nach


- 


DE Innenliegende Hinweise beachten!
EN Observe hints inside!
FR Respecter les indications internes!
IT Osservare le avvertenze all'interno!
- 


DE Hersteller
EN Manufacturer
FR Fabricant
IT Produttore
- 

DE Aus Naturkautschuklatex
EN From natural rubber
FR En latex de caoutchouc naturel
IT In lattice di gomma naturale
- 

DE Nicht 2x benutzen
EN Don't use twice
FR Ne pas utiliser 2x
IT Non riutilizzare
- 

DE Trocken lagern
EN Store in a dry place
FR Stocker dans un endroit sec
IT Conservare all'asciutto
- 

DE Vor Sonne schützen
EN Protect against sunlight
FR Protéger du soleil
IT Proteggere dalla radiazione solare
- 

DE Chargen-Nr.
EN Batch No.
FR N° de lot
IT N. di lotto
- 

DE Verfallsdatum
EN Expiry Date
FR Date d'expiration
IT Data di scadenza

dem Ejakulieren das Kondom am Ring festhalten und den Penis mit Kondom herausziehen.
Gebrauchte Kondome gehören nicht in das WC. Bitte, werfen Sie benutzte Kondome in den Abfall.

Wichtig! Bitte das Kondom nur einmal benutzen, da sonst Infektionsgefahr besteht und die Sicherheitseigenschaften evtl. vermindert werden.

Wer weiß, dass er auf Latex allergisch reagiert, sollte keine Kondome aus Naturkautschuklatex benutzen, da eine Überreaktion bis zum anaphylaktischen Schock nicht ausgeschlossen werden kann.

Kondome vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

EN: Please attend LOT number and expiry date on the condom foil.

In case additional lubrication is needed, only lubricants are recommended which are recommended to be used together with condoms. Do not use any oil-based lubricants such as e.g. petroleum jelly, baby oil, body lotion, massage oil, butter or margarine as lubricant as these are deleterious to the integrity of the condom.

Please attend that in case you parallel apply any prescription or over-the-counter medicines to the penis or the vagina, please consult a doctor or a pharmacist about the compatibility with the condom. In case of slight irritations e.g. skin irritation or the like please also consult your doctor. In case that during use a tear or hole in the condom was found please contact a doctor within 72 h.

SICO condoms are a reliable means of protection against pregnancy and sexually transmitted diseases. No contraceptive can protect one hundred percent. More information see below: www.cpr-germany.de

Before any sexual contact condoms should be rolled over the erect penis, in order to protect against sexually transmitted diseases and pregnancy.

Remove the condom carefully with your fingers from the foil and treat it carefully in order to avoid damages by finger nails, jewellery etc.

In case the individual container is damaged, do not use it but use a new one which is not damaged.

Pinch the reservoir with the thumb and the index finger and place the condom on the erect penis. Thus there will be no air cushion. Withdraw the prepuce for your security. Unroll the ring with the other hand completely. If during application there is a feeling that the condom is slipping off or is overstretched over the penis, please stop the application and check the condom because of danger of rupture. After ejaculation hold the condom at the ring and withdraw the penis with the condom.

Do not put any used condoms into the toilet. Please put used condoms into the waste.

Important! Please use the condom only once as otherwise there is a risk of infection and security features may be reduced.

Any user who knows about an allergy against Latex should not use any condoms from natural rubber latex as an overreaction or even an anaphylactic shock cannot be excluded.

Protect condoms against heat and direct sunlight.

FR: Veuillez noter le numéro de LOT et la date d'expiration sur l'emballage du préservatif.

Si vous ajoutez un lubrifiant, choisissez un produit recommandé pour l'usage du préservatif, et non un article à base d'huile, tel que de la vaseline, huile pour bébé, lotion corporelle, huile de massage, beurre, margarine, etc.

Demandez conseil à un médecin ou un pharmacien au sujet de la compatibilité des médicaments consommés, qui peuvent entrer au contact du préservatif.

En cas de légère irritation, par ex. Irritation cutanée ou similaire veuillez également demander conseil à votre médecin. Si un préservatif présente des fissures lors de son utilisation, ou que des trous apparaissent, veuillez consulter un avis médical au plus tard dans les 72h.

Les préservatifs SICO représentent une protection fiable, mais ne proposent ni une contraception, ni une protection à 100% contre le risque de grossesse, le SIDA et/ou les maladies infectieuses. Plus d'informations sur: www.cpr-germany.de

Avant chaque rapport sexuel, déroulez le préservatif sur le pénis en érection, afin de vous protéger des maladies sexuellement transmissibles et du risque de grossesse. Manipuler avec soin le produit et éviter de l'endommager avec vos ongles, bijoux, etc., en le déballant.

Si le préservatif est endommagé, le jeter et en utiliser un neuf.

Arrêtez-vous, si vous remarquez que le préservatif glisse ou dysfonctionne et vérifiez son état afin d'éviter tout risque de fissures. Directement après l'éjaculation, retirez le pénis de l'orifice en saisissant le préservatif à sa base. Ne jamais jeter les préservatifs usagés dans les toilettes, mais dans les ordures ménagères.

Important! Ne pas utiliser à 2 reprises. Une réutilisation peut augmenter le risque d'infection ou de défaillance. A utiliser exclusivement pour un usage vaginal.

Le latex de caoutchouc peut provoquer des réactions allergiques, notamment des chocs anaphylactiques.

IT: Si prega di annotare il numero del LOTTO e la data di scadenza sulla pellicola del preservativo.

In casodi uso aggiuntivo di lubrificanti, utilizzarne solo uno consigliato per i preservativi e non ricorrere mai a lubrificanti con base oleosa quali la vaselina, olio per bambini, lozioni per il corpo, olio per massaggi, burro, margarina, ecc.

Consultare un medico o un farmacista per sapere se i medicinali utilizzati sono compatibili con il contatto con i preservativi.

In caso di lievi irritazioni, ad es. irritazioni cutanee o simili, si prega di consultare anche il proprio medico per una consulenza. Nel caso in cui il preservativo si laceri o si formi un buco durante l'utilizzo, consultare un medico il prima possibile, al massimo entro 72 ore.

I preservativi SICO rappresentano una protezione affidabile, tuttavia si tratta di un metodo contraccettivo che non offre una protezione al 100% contro gravidanza, AIDS e/o malattie infettive. Maggiori informazioni su: www.cpr-germany.de

Prima del contatto sessuale applicare il preservativo sul pene eretto al fine di evitare il contagio di malattie sessualmente trasmissibili e gravidanza non desiderata. Mareggiare il preservativo con cura e al momento di estrarlo dalla confezione fare attenzione a non danneggiarlo con unghie, braccialetti, anelli, ecc.

In caso di preservativo danneggiato, smaltirlo e utilizzarne un altro.

Se si nota che il preservativo scivola o è troppo aderente, fermarsi e controllarlo al fine di evitare il rischio di rottura. Estrarre il pene subito dopo l'eiaculazione tenendo stretto il preservativo dall'inizio del pene. Non gettare i preservativi usati nel water, bensì nella spazzatura.

Importante! Non riutilizzare il preservativo poiché ciò può limitare la sua efficacia e aumentare i rischi di infezione. Utilizzare solo vaginalmente.

Il lattice di gomma naturale può provocare reazioni allergiche, inclusi shock anafilattici.

HERSTELLERANGABEN

Auf der Innenseite des Werbebriefchens befinden sich wichtige Gebrauchshinweise des Herstellers mit vier Abbildungen zur Benutzung des Kondoms.



BEDRUCKUNG KONDOM

Die Vorder- und Rückseite des Kondoms kann grundsätzlich nicht individuell gestaltet oder verändert werden.
 (Sonderwünsche auf Anfrage) Diese Seite brauchen Sie bei Ihrer Gestaltung also nicht zu berücksichtigen.
 Die korrekten Inhalte (Gesetzliche Pflichtangaben) werden vom Kondom-Hersteller eingefügt.



Kondom
 nicht individuell
 bedruckbar



HERSTELLERANGABEN

Produktname; LOT Nummer und Verfallsdatum; CE-Kennzeichnung



6 Education
Kondom-Werbebriefchen



KNNVO - Die Kasse
Kondom-Werbebriefchen



Schmelze Gartencenter
Kondom-Werbebriefchen



Queer Naunries - Der Verein
Kondom-Werbebriefchen



Eine Auswahl bedruckter Kondom-Werbebriefchen

Haben Sie schon eine Idee für Ihre Werbung? Auf diesen Seiten finden Sie eine kleine Auswahl an

Motiven - auf taschis.com gibt es weitere Gestaltungsideen.

Noch mehr Motiv-Ideen finden Sie auf www.taschis.com

Die in dieser pdf dargestellten Motive, inklusive der Firmen-, Orts- und Namensbezeichnungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Firmen, Orten oder Personen wären rein zufällig.

Taschis

OBERER GRASWEG 50 A | 85055 INGOLSTADT | TEL. 0 841 - 13 80 76 10 | WWW.TASCHIS.COM